
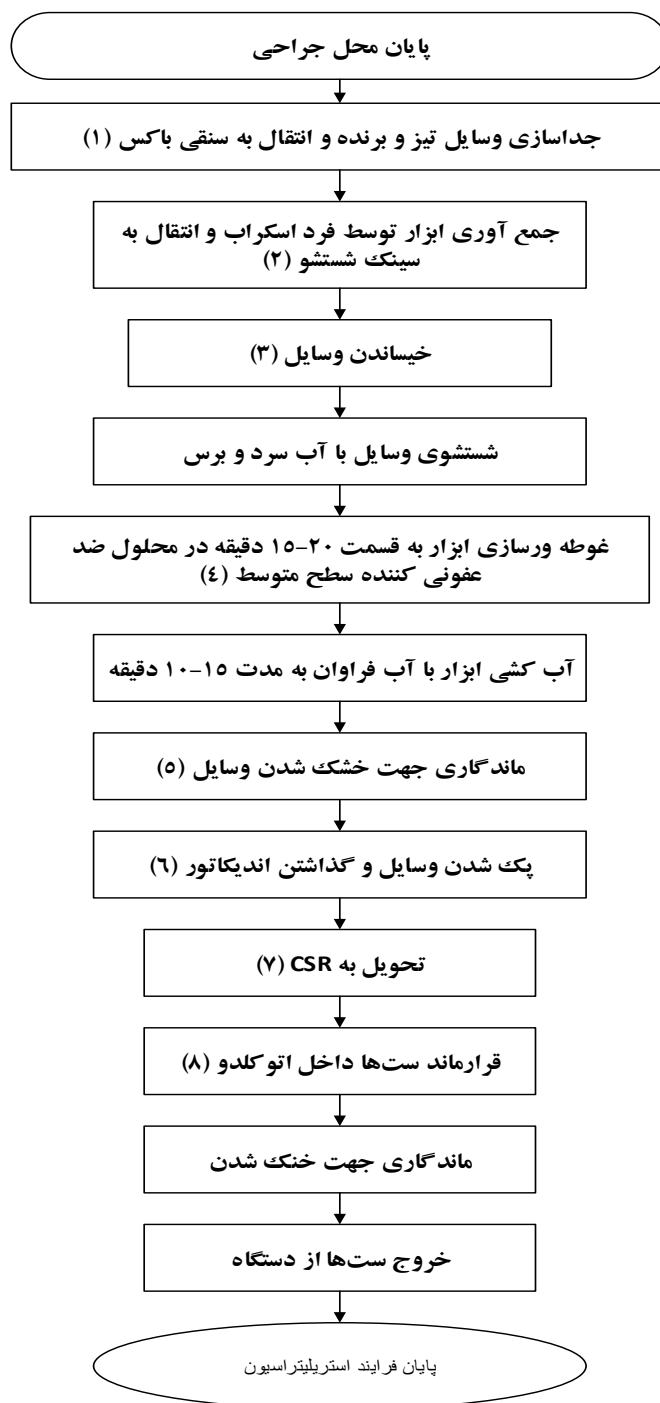


کد فرآیند	نام فرآیند فرایند استریلیزاسیون اتاق عمل	 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی قزوین بیمارستان امیرالمؤمنین
تاریخ ابلاغ		
شماره صفحه		



توضیحات:

- ۱- موارد مورد نیاز: لگن استیل جهت غوطه ور سازی- وسایل نظافت فردی- محلول
- ۲- شمارش مجدد ابزار
- ۳- در آب خیسانده می شوند
- ۴- در محلول سایاسپت ۲٪ غوطه ور می شوند
- ۵- قبل از پک شدن، وسایل حتما باید کاملاً خشک شوند
- ۶- در ست های مقدار ۵ قلم، اندیکاتور کلاس ۴ و در ست ها بیشتر از ۵ قلم، اندیکاتور کلاس ۶ می گذارند.
- ۷- زمان لازم جهت یک دوره سیکل، ۴۰ دقیقه می شود
- ۸- قرار گرفتن پک و ست ها داغ روی توالی سرد و ایجاد میعان باعث آن استریل شدن ست ها می شود (زمان لازم ۲۰ دقیقه)

ملزومات و منابع مورد نیاز:

نام بخش مربوطه: