


نحوه شروع به کار

بررسی کنید که انسولین درست را انتخاب کرده باشید. (انسولین لاتتوس، انسولین نوامیکس یا انسولین نوارپید)



درپوش قلم را برداشته و بررسی کنید که انسولین شفاف باشد.




درپوش قلم را بردارید. غشاء لاستیکی را با پنبه الکلی ضد عفونی کنید. نوار محافظ را از روی سوزن یک بار مصرف جدا کنید. سوزن را به طور مستقیم و محکم به سر قلم وصل کنید. درپوش بزرگ خارجی سوزن را بردارید و آن را جهت استفاده بعدی نگه دارید و درپوش داخلی سوزن را بردارید و آن را دور بیندازید.

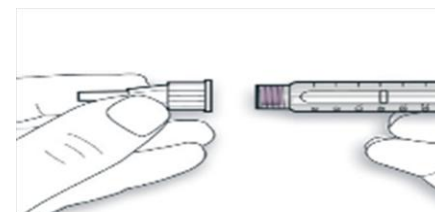

تست ایمنی قبل از هر تزریق را انجام دهید. با چرخاندن پیچ گردان دوز در جهت عقربه های ساعت یک دوز 2 واحدی انتخاب کنید. سرپوش های خارجی و داخلی سوزن را بردارید. قلم را طوری نگهدارید که سوزن آن به سمت بالا باشد. به ملایمت چند دفعه به محفظه انسولین ضربه بزنید تا حباب های موجود در قسمت فوقانی کنارترج جمع شوند.

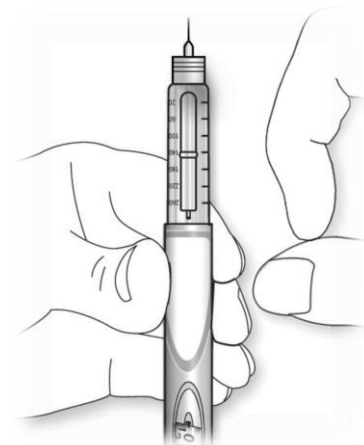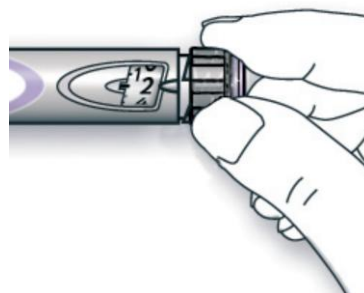

ضمن نگه داشتن سوزن به سمت بالا دکمه فشاری را تا آخر به داخل بفشارید. انتخاب کننده دوز روی صفر برخواهد گشت. باید از نوک انسولین یک قطره انسولین خارج شود. در غیر این صورت سوزن را عوض کنید و مراحل انجام شده را شش بار تکرار کنید. اگر همچنان قطره انسولین ظاهر نشد دستگاه معیوب است و از قلم جدیدی باید استفاده کرد.

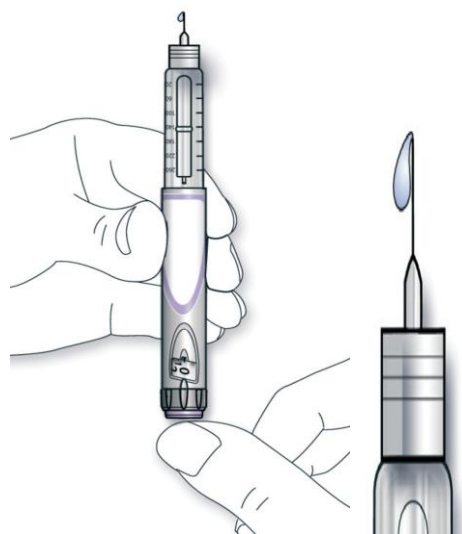

شروع به تزریق:

به تعداد واحدهایی که قصد تزریق آنرا دارید انتخاب کننده ی دوز را بچرخانید.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

مرکز آموزشی درمانی ولایت

روش تزریق انسولین های قلمی



دفتر پرستاری


واحد آموزش سلامت

داخلی 538

بعد تزریق تا زمان خارج کردن سوزن از پوست
،دکمه فشاری را کاملاً فشرده نگه دارید . سوزن
باید حداقل شش ثانیه در پوست باقی بماند

درپوش خارجی سوزن را گذاشته و سوزن
را بچکانده و باز کنید. سوزن را طبق دستورالعمل
دوربیندازید. اگر از درپوش داخلی سوزن
استفاده کنید از جراحات به وجود آمده در اثر
فرورفتن تصادفی سوزن اجتناب می شود.


محل های صحیح تزریق انسولین :

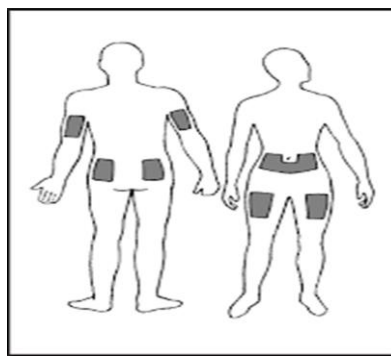

آدرس:

قزوین ، مینودر ، کوی الهیه ، بلوار 22 بهمن
مرکز آموزشی درمانی ولایت

در صورت نیاز به تصحیح دوز ، انتخاب کننده
رادر جهت بالا یا پایین بچرخانید تا دوز صحیح
در مقابل خط نشانه قرار گیرد . در هنگام
چرخاندن مراقب باشید تا دکمه فشاری را فشار
ندهید زیرا باعث خارج شدن انسولین می شود .
نمی توان دوز بزرگتر از تعداد واحد های باقی
مانده در کارتریج را انتخاب نمود .

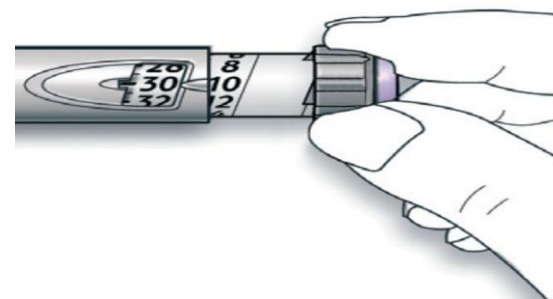

سوزن را داخل پوست کنید و دوز مورد نظر را با
فشار دادن دکمه فشاری تا انتها یعنی تا وقتی که
صفر در مقابل خط نشانه قرار بگیرد تزریق
کنید . چرخاندن انتخاب کننده دوز باعث تزریق
انسولین نخواهد شد

